



## Lancettes jetables stériles

permettant un prélèvement de sang capillaire efficace et confortable

### Quasiment indolore

La pointe d'aiguille à triple biseau garanti, par polissage électrolytique, une finition nette et douce pour des prises de sang optimales et confortables. En outre, le diamètre de mylife™ Lancets atteint 30G.




mylife™ Lancets  
(agrandie 150 x)



Lancettes concurrentes  
(agrandie 150 x)

### Longueur d'aiguille utile


L'aiguille est positionnée, garantissant une concentricité et une longueur d'aiguille utile constantes.

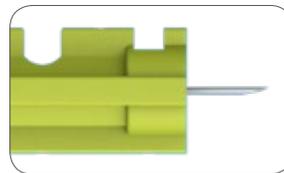

## Procédure d'utilisation avec mylife™ AutoLance™



**1.** Autopiqueur mylife™ AutoLance™ avec fonction automatique de chargement et de déclenchement.

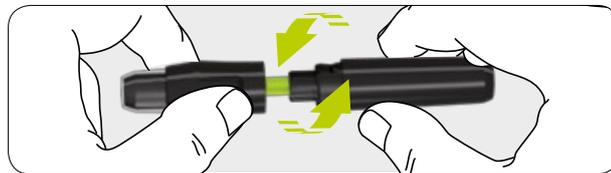


**2.** Verrouillage à baïonnette pratique et fonction d'arrêt pour un changement facile des lancettes.




**3.** Pour prévenir toute blessure par piqûre, la lancette peut aisément être enfoncée dans son capuchon protecteur. Élimination en toute sécurité après utilisation.




## Procédure d'utilisation avec mylife™ Softlance

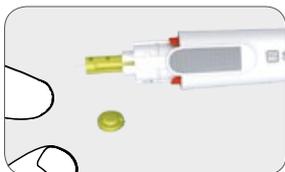

**1.** Autopiqueur mylife™ Softlance et mylife™ Lancet après utilisation.

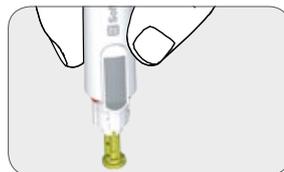

**2.** Pour prévenir toute blessure par piqûre, la lancette peut aisément être enfoncée dans son capuchon protecteur.

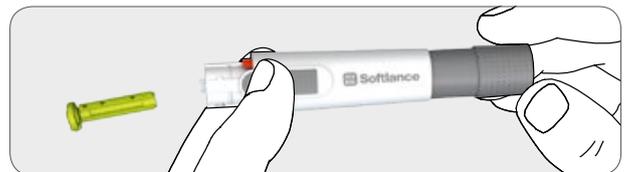

**3.** Ejection sûre et hygiénique de la lancette sans contact avec les mains. Éliminez la lancette usagée dans un récipient à l'épreuve des perforations ou dédié au matériel contaminé.



## mylife™ Lancets, une gamme de produits de qualité pour les adultes et les enfants

### mylife™ Lancets standard

Des lancettes de qualité pour une utilisation quotidienne qui assurent un prélèvement sanguin optimal. Conçues pour rendre le prélèvement sanguin facile et confortable.

### mylife™ Lancets multicolor

Même fonctionnement que les mylife™ Lancets standard, mais disponibles en sept couleurs différentes.



### Stérilité préservée pendant 5 ans

Dose stérilisante déterminée selon la norme ISO 11137-2:2012

N° réf.	Qté.	Description	Calibre	Diamètre d'aiguille	Longueur de pt.	Diamètre ext. du corps
7101030	200 pcs	mylife™ Lancets <b>standard</b>	30G	0,30 ± 0,01 mm	3,3 ± 0,3 mm	6,3 ± 0,5 mm
7101031	200 pcs	mylife™ Lancets <b>multicolor</b>	30G	0,30 ± 0,01 mm	3,3 ± 0,3 mm	6,3 ± 0,5 mm

Avril 2019

mylife™ Lancets & mylife™ Lancets multicolor – dispositifs de prélèvement capillaire destinés aux personnes atteintes de diabète pour effectuer une ASG. // Mandataire UE: Emergo Europe // Pour un bon usage de ce produit, lire attentivement les recommandations d'utilisation. Lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien pour toute question au sujet de ce dispositif médical. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au nom de cette réglementation, le marquage CE.